

PRAES

PRACUJ BEZPIECZNIE

MOBILNA

PŁUKANKA DO OCZU

www.praes.pl



SAFETY AT WORK



SERIA
PRODUKTOWA

plum
Safety

Plum Safety to duńska firma specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości rozwiązań z zakresu pierwszej pomocy. Asortyment obejmuje płyny do przemywania oczu, plastry, żele na oparzenia, bandaże, płyny do odkażania oraz inne praktyczne produkty przeznaczone do szybkiego i skutecznego leczenia drobnych urazów w różnych środowiskach pracy.

www.praes.pl

Szybka pomoc w neutralizacji ran i oczu w razie wypadków z substancjami chemicznymi

PLUM Wound and Eyewash pH Neutral 4,9% to specjalistyczny preparat do szybkiego płukania w sytuacjach awaryjnych, gdy istnieje ryzyko kontaktu z substancjami drażniącymi lub żrącymi. Formuła oparta o układ buforujący (4,9%) została zaprojektowana tak, aby możliwie szybko ograniczyć agresywne działanie chemikaliów poprzez stabilizację odczynu w miejscu kontaktu. Produkt jest przeznaczony zarówno do płukania oczu, jak i do oczyszczania drobnych ran w ramach natychmiastowej reakcji na incydent – zanim poszkodowany trafi pod opiekę medyczną. Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4,9% Phosphate to roztwór buforowy, który szybko neutralizuje kwasy i zasady



- ◆ Szybkie działanie neutralizujące – minimalizuje skutki wypadków z kwasami i zasadami
- ◆ Łatwy w użyciu – można go łatwo zastosować samodzielnie lub z pomocą innej osoby
- ◆ Elastyczne rozwiązania – butelki do użytku mobilnego oraz stacje do montażu na ścianie
- ◆ Szerokie zastosowanie – od zakładów przemysłowych po laboratoria i apteczki pierwszej pomocy
- ◆ Wysoka niezawodność działania
- ◆ Produkt posiada oznaczenie CE zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych (UE) 2017/745
- ◆ Okres przydatności do użycia wynosi 3,5 roku



W przypadku urazów chemicznych czas jest krytyczny. Płukanie rozpoczęte natychmiast realnie zwiększa szanse na ograniczenie skutków ekspozycji. Dlatego pH Neutral 4,9% jest często wybierany jako pierwsza linia reakcji w strefach zagrożonych rozchłapywaniem chemikaliów – tam, gdzie odległość do źródła wody jest zbyt duża, a liczą się sekundy. W dobrze wdrożonym systemie BHP produkt stanowi praktyczne uzupełnienie dla natrysków bezpieczeństwa i standardowych płukanek izotonicznych.

Płyn do przemywania ran i oczu w przypadku obecności ciał obcych

Ten płyn do przemywania ran i oczu to sterylny 0,9% roztwór chlorku sodu, który łagodzi dyskomfort i zapobiega późniejszym powikłaniom spowodowanym obecnością ciał obcych w ranach lub oczach.

- Skutecznie usuwa kurz, brud i zanieczyszczenia z ran lub oczu
- Łatwy w użyciu – można go łatwo zastosować samodzielnie lub z pomocą
- Elastyczne rozwiązania – butelki do użytku mobilnego oraz stacje do montażu na ścianie
- Ergonomiczne muszle zapewniające miękki i przyjemny obraz
- Szerokie zastosowanie – od zakładów przemysłowych po laboratoria i apteczki pierwszej pomocy
- Wysoka niezawodność działania
- Produkt posiada oznaczenie CE zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych (UE) 2017/745
- Okres przydatności do użycia wynosi 3,5 roku



W miejscach pracy, w których istnieje ryzyko wypadków chemicznych, zaleca się stosowanie preparatu Plum Wound and Eyewash 0,9% chlorku sodu w połączeniu z preparatem Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4,9% fosforanu




Płucz obydwa oczy jednocześnie !

Nie musisz już wybierać, które oko uratować. Plum DUO eyecup to unikalne rozwiązanie, które pozwala przepłukać obydwa oczy jednocześnie i uratować je obydwa. Urazy oczu spowodowane substancjami chemicznymi często dotyczą obu oczu. Miseczka do płukania oczu DUO pomaga się na to przygotować, ponieważ umożliwia jednoczesne płukanie obu oczu. Nie musisz już martwić się, które oko ratować – ratuj je obydwa naraz. Kształt nakładki na oczy ułatwia utrzymanie otwartych oczu podczas płukania oraz zapewnia prawidłowy przepływ płynu i odpowiedni czas płukania.

Niewiarygodna prostota użycia:

Butelki są wyposażone w zestaw ergonomicznych nakładek na oko, które zapewniają prawidłowe i równomierne dozowanie płynu. Aby użyć wystarczy - Delikatnie ścisnąć butelkę, aby uzyskać łagodny i przyjemny strumień.



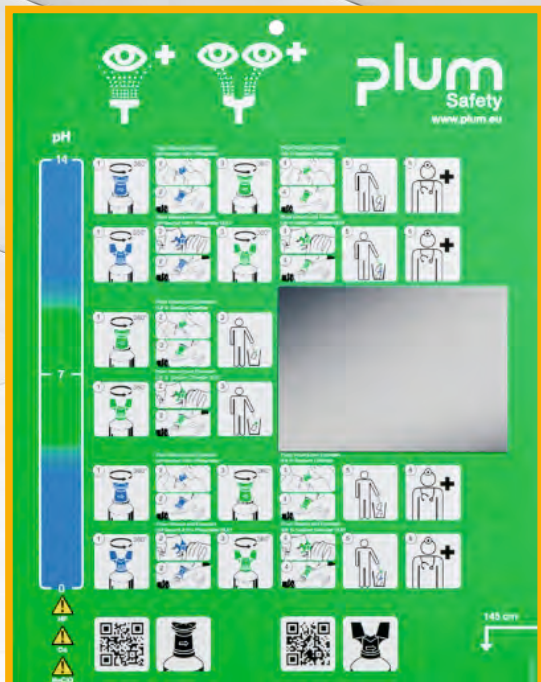

Pamiętaj!

W razie wypadku należy koniecznie ustalić, czy został on spowodowany przez ciało obce, czy też przez kwasy lub zasady – a jeśli to możliwe, określić wartość pH danej substancji. Jeśli pH jest silnie kwaśne lub zasadowe, należy rozpocząć płukanie preparatem Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4,9% Phosphate i kontynuować do opróżnienia butelki.

Następnie należy wyrzucić butelkę i płukać preparatem Plum Wound and Eyewash 0,9% Sodium Chloride do momentu zgłoszenia się do lekarza lub na pogotowie. Gdy pH jest neutralne, przepłukuj roztworem Plum Wound and Eyewash 0,9% chlorku sodu, aż butelka się opróżni, a po użyciu wyrzucić butelkę.

Dlaczego **zawsze** należy odwracać butelkę dnem do góry?

Niezależnie od tego, czy butelka jest wkładana do stacji, do pudełka, czy też pozostawiana luzem, ważne jest, aby była ustawiona dnem do góry.


Wskazuje na to ten symbol na butelce



Piktogramy instruujące o prawidłowym stosowaniu produktu



Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie, należy zawsze zwracać uwagę na piktogramy i symbole na butelce.

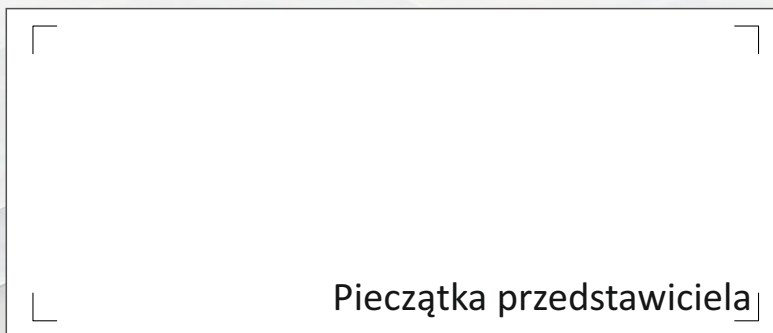

Pieczętka przedstawiciela

Praes Sp. z o.o.
ul. Szajnochy 18/20
85-738 Bydgoszcz
Polska / Poland 
biuro@praes.pl